

Thrive Hearing Control App Bruksanvisning

Gratulerer med ditt aktive
valg om bedre hørsel og
velvære

thrive



Thrive Hearing Control app

Innledning	4
Apple brukere	
Paring/Tilkobling	5
Nedlasting	8
Android brukere	
Nedlasting	9
Paring/Tilkobling	10
Hjemskjerm	
Innstillinger	13
Hjelp	13
Tilkoblingsstatus	13
Thrive assistent	13
Aktivt program	13
Thrive Score	13
Volum	14
Mute	14
Navigering	14
Hjem	15
Programvalg	15
Personliggjør	
Personliggjør	16
Equalizer	16
Tale i støy	16
Støy	17
Vind	17
Retningsmikrofon	18
SoundSpace	18

Velvære Score	
Generelt	19
Kognitiv	19
Fysisk	20
Falldeteksjon og varsling	21
Tilbehør	23
Voice AI	23
Innstillinger	
Brukermanual	24
Apparatinnstillinger	24
Thrive Score	25
Falldeteksjon	26
Oversett	27
Transkriber	27
Feilsøking	28
Påminnelser	28
Hearing Care Anywhere	30
Thrive Care app	31
Finn mine høreapparater	32
App-innstillinger	32
Om	32
Demomodus	33
Sikkerhetsinformasjon	33

Funksjoner varierer med produkt og teknologinivå. Sprø din audiograf om dette.

Denne appen kan ha små ulikheter avhengig av din telefon.

Thrive-kompatible høreapparater



Vist ovenfor er de Thrive platform 2.4 GHz høreapparatene som er kompatible med Thrive Hearing Control app.

Apple® eller Android™


Apple®s eller Androids operativsystem er ansvarlig for å administrere tilkoblingen mellom mobil-enheten din og Thrive-kompatible høreapparater. Thrive Hearing Control app er et supplement til høreapparatene dine, som tilbyr en rekke forbedrede justeringsfunksjoner. Med Thrive kan du tilpasse høreapparatene dine til din unike livsstil.

MERK: IOS OPPDATERING. Når du oppdaterer versjonen av IOS på iPhone, kan høreapparatene miste forbindelsen, og krever at du kobler fra og kobler sammen høreapparatene med iPhone igjen. For den nyeste informasjonen om kompatibilitet, besøk: <https://www.starkey.no/hoereapparater/apper>

Tilkobling for Apple enheter



For å kunne bruke appen Thrive Hearing Control, må du først koble høreapparatene dine til din iOS-enhet.

1. Kontroller at Bluetooth® er aktivert på din iOS-enhet. I Innstillinger-menyen går du til Bluetooth og skifter til På.
2. Slå høreapparatene dine av og på. Enten ved å åpne batteriskuffen og lukke den igjen, eller for oppladbare apparater; sette dem i laderen og ta dem ut igjen. Dette setter høreapparatene i paringsmodus.
3. I Innstillinger-menyen, gå til **Tilgjengelighet > Høreapparater**.
 - Du vil se høreapparatets navn (for eksempel "Kari Hearing Aids") når iOS-enheten først oppdager høreapparatene dine.
 - Hvis navnet ditt ikke vises på listen "MFI-høreapparater" innen 5-7 sekunder, tapper du på **Tilbake** øverst til venstre og klikker igjen på **Høreapparater**.

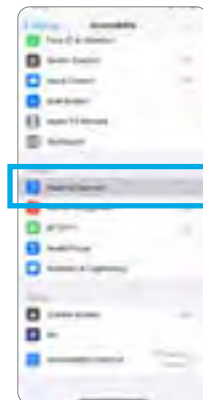

4. Tæpp på høreapparatets navn for å koble høreapparatene til din iOS-enhet.
5. Du vil se to sammenkoblingsforespørsler (en for hvert høreapparat). Velg *Koble sammen* for hver forespørsel. Disse forespørlene kan komme med flere sekunders mellomrom.
6. Når paringen er fullført, endres høreapparatets navn fra svart til blått.

Du er nå klar til å bruke iOS-enheten til å justere høreapparatet. Du kan justere enten med de opprinnelige iOS-kontrollene eller med Thrive-appen.

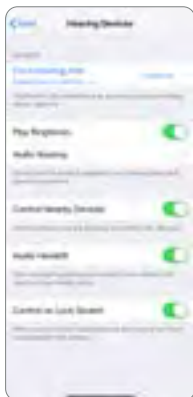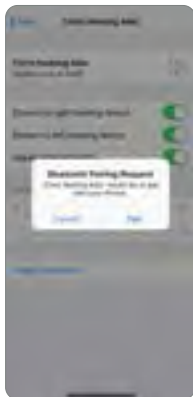

Koble høreapparatene til Apple-enheten din igjen

Når du slår av høreapparatene eller Apple-enheten, er de ikke lenger koblet til hverandre. For å koble til igjen, slå på Apple-enheten din og slå på høreapparatene dine.

Høreapparatene kobles automatisk til din Apple-enhet. Du kan også bekrefte denne tilkoblingen via Tilgjengelighetsnarveien ved å trippelklikke på Hjem-knappen (iPhone 8 eller eldre), eller på sideknappen (iPhone X og nyere) på din iOS enhet.

Last ned Thrive Hearing Control App for Apple enheter

Thrive Hearing Control gjør det enkelt å kontrollere og justere høreapparatene dine med din kompatible Apple-enhet. Det er enkelt å laste ned appen. Følg de trinnvise instruksjonene nedenfor:

En: Åpne "App Store" på en kompatibel Apple-enhet.



To: Skriv "Thrive Hearing Control" i søkeboksen.



Tre: Tæpp "HENT" for å laste ned

appen til enheten din. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp appen.



Fire: Når appen er installert, åpne Thrive Hearing Control-appen fra startskjermen eller applisten.



Last ned Thrive Hearing Control app for Android enheter

Thrive Hearing Control gjør det enkelt å kontrollere og justere høreapparatene dine med din kompatible Android-enhet. Det er enkelt å laste ned appen. Følg de trinnvise instruksjonene nedenfor:

En: Åpne "Google Play Store" på en kompatibel Android-enhet.



To: Skriv "Thrive Hearing Control" i søkeboksen.



Tre: Tæpp "HENT" for å laste ned

appen til enheten din. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp appen.



Fire: Når appen er installert, åpne Thrive Hearing Control-appen fra startskjermen eller applisten.



Tilkobling for Android enheter

Følg instruksjonene nedenfor for å koble høreapparatene til Android-enheten din. Hvis høreapparatene mister forbindelsen til enheten din, gjenta instruksjonene nedenfor for å koble til igjen.

1. Start Thrive-appen.
2. Etter søking vil tilgjengelige høreapparater vises på skjermen. **MERK:** Hvert høreapparat vises separat.
3. Merk av i ruten ved siden av hvert høreapparat, og velg [Tilkoble](#).

MERK: *Tilkoblingen kan fremdeles fullføres via Bluetooth-menyen på Android-enheten din, hvis du ønsker det.*




Tilkoble dine høreapparater til din Android enhet igjen

Når du slår av høreapparatene eller Android-enheten, vil de ikke lenger være koblet til hverandre. For å koble til igjen, slå på Android-enheten din og deretter slå på høreapparatene.

Høreapparatene kobles automatisk til Android-enheten din. Hvis du har problemer med å få høreapparatene og appen til å koble til igjen, sjekk Bluetooth-innstillingene på Android-enheten din for å forsikre deg om at høreapparatene dine fortsatt er sammenkoblet, og hvis ikke, gjenta sammenkoblingsprosessen.

Kom i gang/Oppsett

Første gang du åpner Thrive-appen, blir du bedt om å lese og godta lisensavtalen og personvernreglene, samt tilpasse konfigureringen av appen. Du har muligheten til å sette opp varsler og å sette opp en sky-konto for Hearing Care Anywhere-funksjonen. Thrive-appen vil som standard være i avansert modus. Du kan velge enkel modus når som helst i Innstilling-menyen.

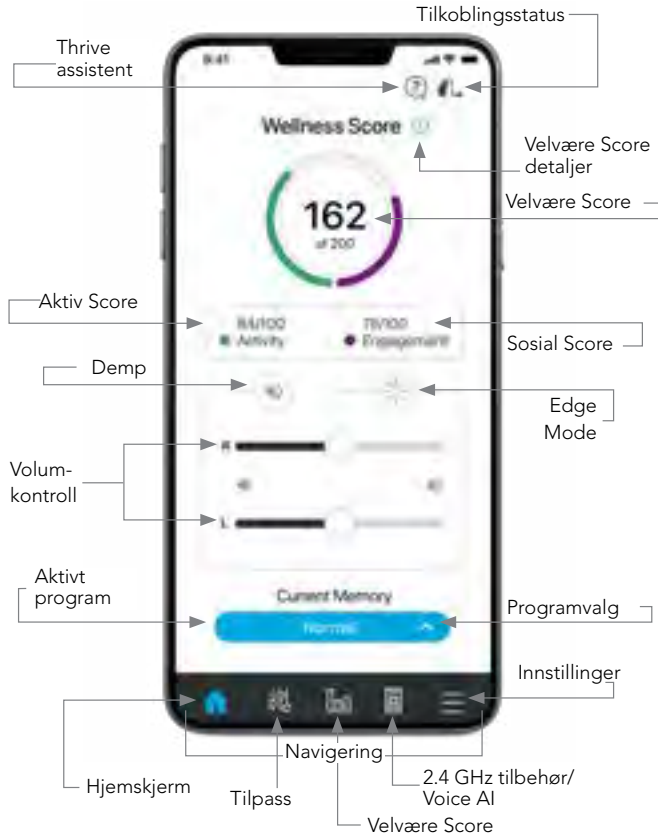

Denne appen kan ha små forskjeller avhengig av telefon- og/eller høreapparatmodell.

Tilkoblings-status

Tæpp for å se gjeldende tilkoblings-status for dine høreapparater.

Thrive assistent*

Med Thrive assistent kan du få talestyrt hjelp i Thrive appen for å svare på spørsmål eller reagere på kommandoer. Thrive assistent kan aktiveres via et ikon i Thrive appen eller ved å dobbelt-tæppe på dine høreapparater. Du kan spørre om hjelp til funksjoner i Thrive, be høreapparatet ditt om å bytte program eller endre volum, opprette en påminnelse, og til og med be om hjelp til å finne din iPhone. Eksempler på talekommandoer: "bytt program til restaurant" eller "minn meg på å hente resepten min i morgen kl. 15" eller "hvor er min telefon?".

Velvære Score

En visuell fremstilling av fysisk og kognitiv velvære. Kun tilgjengelig i avansert versjon.

Aktivt program

Navnet på det aktive programmet vises her.

Innstillinger

Tap to open the Menu. See Settings section for full description.

Hjelpemenuen forklarer funksjonen til hver tilgjengelige skjerm. Alle hjelpefiler kan finnes under [Innstillinger](#) > [Brukermanual](#).

*Krever en skytjeneste

Volum

Øk / senk lydstyrken på høreapparatene dine ved å bevege skyvekontrollen for hver side (H / V) eller ved å bruke glideplaten (området mellom venstre og høyre skyvekontroll) for å justere begge sider samtidig. Dobbel-tæpp hvor som helst på glideplaten for å returnere til programmert lydstyrkenivå. (Indikert ved tynne grå vertikale streker på skyvekontrollene).

Demp

Tæpp på Demp-knappen for å slå av mikrofonene på begge høreapparater. Gjenta handlingen for å slå dem på igjen.

Edge Mode

Edge Mode virker slik at det identifiserer og oppretter en midlertidig, sanntids innstilling som er skreddersydd for utfordrende lyttemiljøer. Ved å tæppe på ikonet vil høreapparatet ditt foreta en skanning av lyttemiljøet for å levere optimal komfort og klarhet. Edge Mode kan også aktiveres ved å dobbel-tæppe på høreapparatet. For mer informasjon, spør din audiograf.



Navigering

Navigeringsmenyen nederst på skjermen gir tilgang til de mest brukte menyene, Personliggjør, Velvære Score, Tilbehør og Innstillinger.




Hjem

Tæpp på Hus- ikonet på navigeringsmenyen for å returnere til hjemskjermen.

Programvalg

Tæpp på ikonet for programvalg for å se og velge mellom tilgjengelige lytteprogrammer, eller for å endre et eksisterende program eller

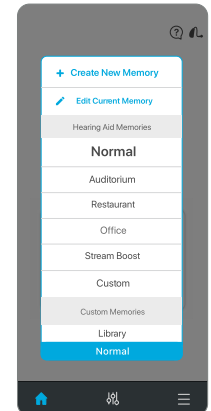


Personliggjør

Tæpp Personliggjør på navigeringsmenyen for å få tilgang til en rekke justeringsfunksjoner for å gjøre individuelle endringer i dine lytteprogrammer.


Equalizer

Få tilgang til equalizer kontroller for flere frekvensområder. Du kan skyve opp/ned for å finne din foretrukne lyd kvalitet. Du kan justere ulikt per lytteprogram.

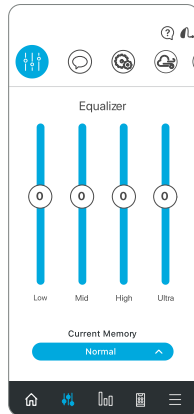


Tale i støy

Tale i støy reduserer mengden bakgrunnsstøy som kommer inn i høreapparatene dine. Du kan justere dette individuelt for hvert lytteprogram. Stillingen lenger til høyre gir mer komfort i støy. Den hvite sirkelen viser gjeldende innstilling.

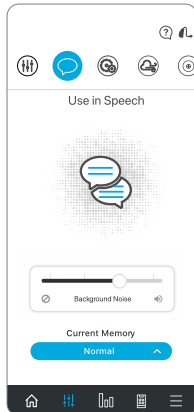


Bruk i støy

Bruk i støy reduserer lyder fra maskiner, motorer, vifter etc. for å øke komforten i støvende omgivelser. Stillingen lenger til høyre gir mer komfort i støy. Den hvite sirkelen viser gjeldende innstilling.

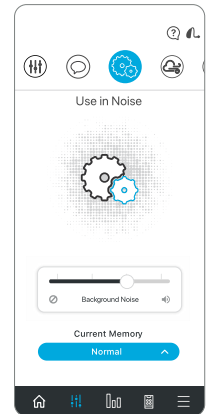


Vind

Vind gir deg mulighet til å redusere lyden av vindsus som blåser over dine høreapparatmikrofoner. Stillingen lenger til høyre gir mer komfort i vind. Den hvite sirkelen viser gjeldende innstilling.

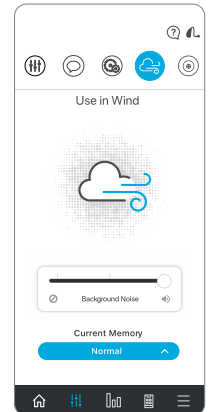


Retningsmikrofon

Retningsmikrofon gir muligheten til å styre lyden rundt deg i hvert program. Bruk dette alternativet for å forbedre evnen til å høre samtale ved å fokusere mikrofonen på lydene foran deg. Den automatiske modusen følger talelyder og undertrykker støy bakfra og fra siden.

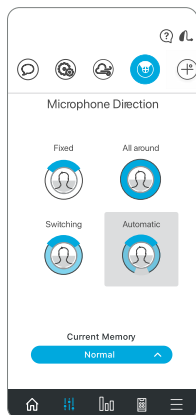

SoundSpace

SoundSpace gjør at du kan bruke mobil-enheten som et personlig finjusteringsverktøy for høreapparater. Det gir muligheten til å modifisere frekvensresponsen for noen av dine egendefinerte Thrive-programmer for bedre ytelse i spesifikke lyd miljøer. Når du beveger fingertuppen rundt på den blanke skjermen, vil innstillingene i høreapparatet ditt

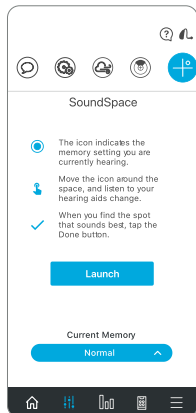

Velvære score

Total Thrive velvære score er en kombinasjon av både kognitiv og fysisk score. Du har muligheten til å nå en poengsum på 200 hver dag.

Sosial score består av tre segmenter. Hvert segment har en poengverdi som gjenspeiler hvordan du bruker høreapparatene dine. Appen Thrive Hearing Control leser bruksdata fra høreapparatene dine og viser dine daglige aktivitet i poeng. Målet ditt er 100 poeng per dag.

Bruks score: poeng oppnås ved å bruke dine høreapparater på daglig basis. Jo mer du bruker dem, jo flere poeng opptjent (40 mulige).

Sosial score: poeng oppnås ved å bruke høreapparatene dine til å engasjere deg med andre mennesker. Jo mer tid som tilbringes i miljøer med samtale, desto flere poeng opptjent (40 mulige).

Aktiv lytting: poeng oppnås når høreapparatene tilpasser seg til utfordrende og forskjellige lytmiljøer. (20 mulige).




Fysisk måling består av fremgang innen tre daglige mål for fysisk aktivitet. Klarer du alle tre målene vil du oppnå 100 poeng. Høreapparatet måler skritt og aktivitet. Data overføres til appen hele dagen. Du kan angi / endre mål i Innstillinger-menyen.

Skritt: viser din fremgang innen det daglige målet for antall skritt (40 poeng mulig).

Aktivitet: viser din fremgang innen det daglige målet for fysisk trening (40 poeng mulig).

Stå oppreist: viser din fremgang innen det daglige bevegelsesmålet som inkluderer å stå oppreist og bevege seg rundt en gang i timen (20 poeng mulig).

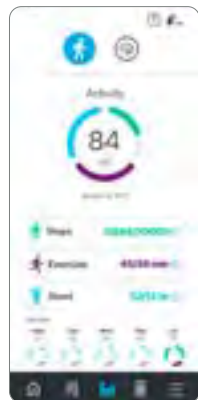

Merk: Høreapparater må regelmessig koble til telefonen i løpet av dagen, og appen Thrive Hearing Control må holdes åpen i bakgrunnen på telefonen din.


Falldeteksjon og varsling

Falldeteksjons-funksjonen kan brukes til å sende en varselstekstmelding som inneholder GPS-posisjonen din til dine utvalgte kontakter, hvis du skulle falle eller oppleve en fallrelatert hendelse. Falldeteksjon kan konfigureres til å sende automatiske og / eller manuelle varsler.

Autovarsling gjør det mulig for sensorene i høreapparatene dine å oppdage et fall automatisk.

Manuell varsling lar deg "trykke og holde" brukerkontrollen på et av høreapparatene for å sende en tekstmelding.

En varselstekstmelding vil bli initiert av Thrive-appen når et fall blir oppdaget eller manuelt initiert av deg. Tekstmeldingen vil bli sendt til maksimalt tre forhåndsdefinerte kontakter, som kan bekrefte mottakelsen av meldingen og få se et kart, som viser din posisjon.

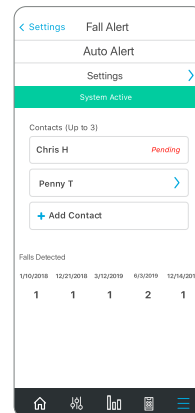

Avbryt varsling lar deg avbryte en automatisk varsling eller manuelt varsel fra enten høreapparatene eller smarttelefonen din. For å avbryte en varseltekstmelding fra høreapparatene dine, trykk på brukerkontrollen på begge høreapparatene. Du vil bli informert om kanselleringen i Thrive-appen og via en talebeskjed i høreapparatene dine. Falldeteksjons-meldinger kan avbrytes innen 60 eller 90 sekunder forhåndsvalgt kanselleringstid etter et varsel er initiert.




Kontakter lar deg identifisere opptil tre kontakter du ønsker tekstmeldinger sendt til.

Du må oppgi navn og smarttelefonnummer for hver kontakt i Thrive-appen. Hver av kontaktene dine vil motta en tekstmelding som ber dem bekrefte deltakelse i Falldeteksjons-systemet.

Tilbehør

Thrive Hearing Control app gir deg mulighet til å kontrollere lyd fra 2,4 GHz trådløse tilbehør som Starkey Hearing Technologies TV og Ekstern mikrofon +. Disse tilbehørene strømmer lyd direkte til høreapparatene dine. Fra appen kan du velge et tilkoblet tilbehør, starte og stoppe lydavspilling og kontrollere volumet for både strømming og omgivelseslyd

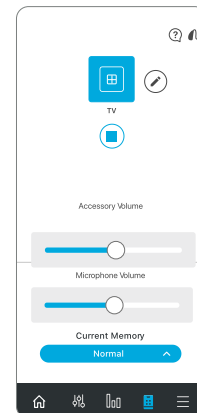

Voice AI* kombinerer fordelene med å bruke smarttelefonens mikrofon sammen med datakraften til kunstig intelligens. Fordelen er kraftigere og mer fleksibel taleforbedring i de mest utfordrende lytemiljøer, for brukere med større hørselstap. Aktiver IntelliVoice ved å tæppe på "spill av" knappen, og pek/legg telefonen med mikrofonen mot den som snakker. Kontakt din audiograf eller Starkey for mer informasjon



*Kun tilgjengelig på iOS smarttelefoner.

Bruksanvisninger

En oversikt over alle skjermer/funksjoner er tilgjengelig i Thrive app. Hver seksjon viser skjermbilder og beskriver hver funksjon.

Apparatinnstillinger

Avanserte innstillinger for ditt høreapparat kan aktiveres i denne seksjonen.

Tæpp-kontroll* lar deg aktivere eller deaktivere tæpp-funksjonen, bestemme følsomheten, og hvilken funksjon som skal aktiveres med tæpp-funksjonen (Thrive assistent, Start/Stop strømming fra tilbehør eller Edge Mode).

Thrive assistent gir deg muligheten til å bruke stemmen for å spørre om ulike funksjoner i Thrive, be dine høreapparater om å endre lytteprogram eller lydstyrke, eller lagre en påminnelse.

Maskemodus finner du under Egendefinerte programmer. Dette programmet kompenserer for lavere talehørbarhet ved bruk av munnbind ved å øke forsterkningen i de påvirkede frekvensområdene. Skru på Maskemodus for å gjøre det tilgjengelig under programvalg.

Auto strømming - Gjør det mulig for høreapparatene å gjenkjenne når en lydstrøm starter og automatisk bytte til et annet program og en mikrofonreduksjon som er spesielt optimalisert for strømming av lyd.

Comfort boost - Slår på aggressiv støyreduksjon, samtidig som lydkvaliteten optimaliseres i støyende omgivelser. Denne funksjonen

er kun tilgjengelig hvis dine høreapparater ikke støtter Edge Mode.

Varsler - Lar høreapparatet spille en varsel tone for bestemte telefonvarsler som kalenderhendelser, e-post og sosiale medier.

Auto Av/På* enkel og automatisk strømsparing når du ikke bruker høreapparatene dine. Ta dem av, legg dem på en flat og stabil overflate, og de vil gå i strømsparingsmodus etter 15 minutter. De vil automatisk slå seg på igjen når du plasserer dem på øret.

Velvære Score

Endre innstillinger for Velvære Score. Du kan legge til / oppdatere dine demografiske data for mer nøyaktig skrittmåling. I tillegg kan du sette / endre mål for skritt, aktivitet og oppreist.

Falldeteksjon

Auto varsel Følsomhet lar deg justere følsomheten for automatiske varsler i Thrive appen. Å øke følsomheten kan bedre sjansene for å oppdage et fall. Å dempe følsomheten kan redusere muligheten for falske varsler.


Profil lar deg endre dine opplysninger.

Auto varsel og Manuelt varsel varseltoner lar deg se og spille av de ulike varseltonene slik at du er kjent med dem i tilfellet av et fall.

Kontakter lar deg legge til, endre eller slette en kontakt.

Tidsvindu for kansellering lar deg velge 60 eller 90 sekunder som den tilmålte tiden før en varseltekstmelding sendes.

Melding om varsel lar deg endre navn og viser et eksempel på en varselstekstmelding.

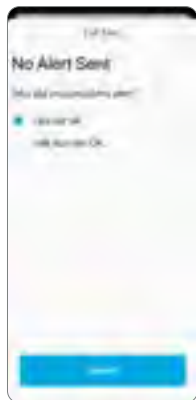


Oversett

Oversett er en funksjon som lar deg velge språk og språket til en annen person for å delta i en samtale. Når du snakker i telefonen, vil appen oversette talen din og vise den på skjermen på den andre personens språk. Når den andre personen snakker i telefonen, vil appen oversette dennes tale, vise den på ditt språk på telefonen, og strøemme den oversatte talen til høreapparatene dine på ditt språk.

Transkriber

Transkriber er en funksjon som fungerer som undertekster for situasjoner i den virkelige verden. Når du eller andre snakker i telefonen, vil Thrive-appen transkribere samtalen og vise den på skjermen din. Det er også mulighet for å lagre, sende som melding, kopiere eller sende den transkriberte teksten som e-post.

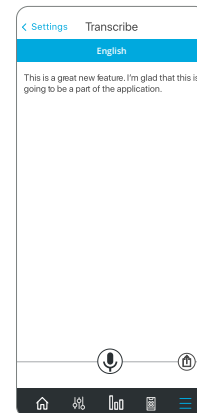



Feilsøking

Feilsøking gir deg en rask og praktisk måte å analysere høreapparatets tilstand på egen hånd. Med Feilsøking kan du få en diagnose av tilstanden til noen av hovedkomponentene i høreapparatet ditt, inkludert mikrofoner, lyd giver, forsterker og sensorer.

Feilsøking vil vise tilstanden til komponenter og gi deg instruksjoner for service om nødvendig (de fleste problemer skyldes voks / rusk og kan løses enkelt). For AI og vanlige høreapparater må audiografen gjøre det første oppsettet av Feilsøking for å etablere et referansenivå for deg. For Edge AI høreapparater vil referansenivået allerede være etablert.

Påminnelser



Påminnelser-funksjonen kan hjelpe deg med å holde rede på viktige oppgaver og avtaler i det travle livet ditt, uten å måtte huske dem alle. Du kan konfigurere og motta visuelle

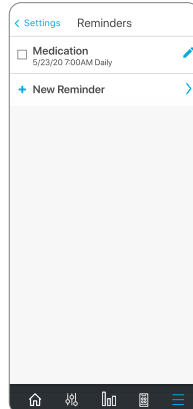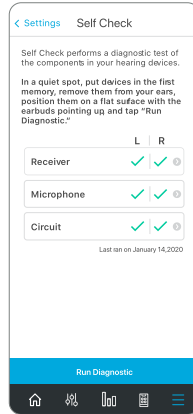

påminnelser på smarttelefonen din og / eller hørbare påminnelser gjennom høreapparatene dine for en rekke oppgaver, for eksempel å ta medisiner, fylle på resepter, rengjøre høreapparatene, trene og drikke vann.

I tillegg kan du tilpasse påminnelserne dine, dvs. ta blodtrykkmedisiner, luften hunden, ring fysioterapeuten, ta med vannflaske og matte til yoga. Etter at du har angitt påminnelserens navn, dato og tid, kan du velge alternativet for å få denne påminnelsen gjentatt daglig, ukentlig, månedlig eller årlig.

Om du trenger ikke bekymre deg hvis du ikke rekker å fullføre oppgaven i det øyeblikket du mottar påminnelsen, fordi forfalte oppgaver vises i rødt på påminnelsskjermen til du merker dem av som utført.

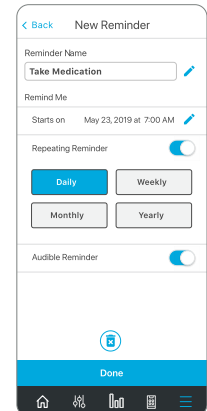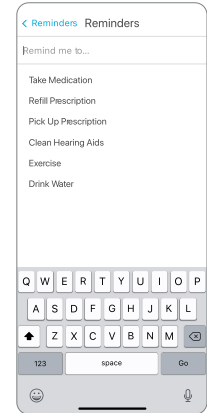

TeleHear Fjernprogrammering

Sette opp en konto


Hearing Care Anywhere krever at du oppretter din egen konto. Gjennom denne kontoen kan høreapparatene dine sikkerhetskopieres og synkroniseres mellom flere telefoner. Du kan opprette en konto under installasjonsprosessen eller på et senere tidspunkt om ønskelig. Du kan opprette en konto ved å bruke din eksisterende Facebook eller Google konto, eller ved å opprette din egen konto ved hjelp av e-post og et passord du velger.

Sikkerhetskopi

Når du gjør endringer ved å bruke Thrive-appen, lagres disse endringene på skykontoen din for å sikkerhetskopiere innstillingene dine i sanntid.

Sanntidsjustering

Du må ha en kode fra din audiograf/hørselsspesialist for å aktivere fjernprogrammering. Ikke alle har mulighet for å tilby dette. Koden lar deg koble deg til en konsultasjon der audiografen kan finjustere høreapparatene dine via en videokonsultasjon.

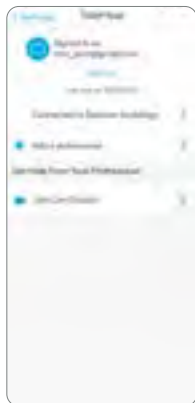



Thrive Care app

Appen Thrive Care gir omsorgspersoner muligheten til å følge med på høreapparatbruk, fysisk og sosial aktivitet.

I Thrive Care, kan du dele informasjon om fysisk aktivitet, høreapparatbruk, sosial aktivitet og mer, med dine utvalgte kontakter.

Finn mine høreapparater

Funksjonen Finn mine høreapparater lar deg spore den sist kjente fysiske plasseringen til høreapparatene dine på et kart. Når funksjonen Finn høreapparat er aktivert, vil du se en kartvisning med et notat som viser hvor høreapparatene dine sist var tilkoblet. Hvis høreapparatene dine er aktivt koblet til (eller blir tilkoblet), vil indikatorene på undersiden av skjermen animere for å vise hvor nært eller fjernt du er fra høreapparatene dine.

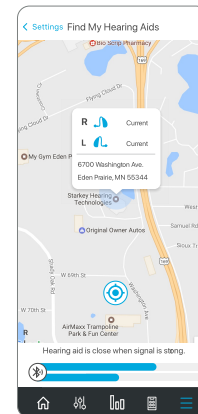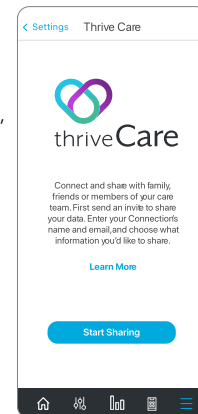

App innstillinger

Alternativer under App-innstillinger inkluderer muligheten til å bytte mellom grunnleggende eller avansert modus og en komplett tilbakestilling av appen Thrive Hearing Control. Avansert modus gir full funksjonalitet for alle funksjonene i appen, mens Enkel modus inneholder grunnleggende fjernkontroll-funksjoner for å holde ting enkelt.

Om

Viser informasjon om Starkey Hearing Technologies, lisensavtalen, personvernregler og app versjonen. Det er også en seksjon hvor man kan gi tilbakemeldinger.

Demo modus

Setter Thrive Hearing Control-appen i en demomodus slik at appen kan fungere uten at høreapparater er tilkoblet, samtidig som de fleste funksjoner er synlige for demonstrasjon. Justeringer som gjøres i Demo modus vil ikke bli brukt i høreapparatene dine.

Sikkerhetsinformasjon

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i sammenheng med din Starkey-enhet bør rapporteres til din lokale Starkey Hearing Technologies-representant og den autoriserte myndigheten i medlemsstaten du er etablert. En alvorlig hendelse er definert som enhver funksjonsfeil, forringelse av enhetens egenskaper og/eller ytelse, eller utilstrekkelighet i enhetens bruksanvisning/merking som kan føre til død eller alvorlig forverring av helseilstanden til brukeren, ELLER kan gjøre det ved gjentakelse.

Tiltenkt bruk

Thrive Hearing Control-applikasjonen er en medisinsk programvare som er beregnet på å tillate en bruker å fjerne volum, programvalg, Mute/Unmute, Media Streaming Start/Stop og tinnitusmaskeringsfunksjonen til Starkey 2,4 GHz trådløse høreapparater. Den gir også et mobiltelefonensnitt for disse høreapparatene og lar brukeren bruke iOS-enheten sin som en lydstrømmeenhet.

Indikasjon for bruk

Thrive Hearing Control Application er et valgfritt program beregnet for pasienter som bruker Starkey 2,4 GHz trådløse høreapparater og som ønsker å bruke en iOS- eller Android-enhet som fjernkontroll, mobiltelefonensnitt eller mediastreamer.

For en elektronisk versjon av denne bruksanvisningen, vennligst besøk www.starkey.no/support/bruksanvisninger

For Thrive Hearing Control app og informasjon om iOS/Android kompatibilitet, vennligst besøk starkey.no/thrivesupport.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a registered service mark of Apple Inc.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Starkey, Starkey logo, SoundSpace, Thrive, Thrive logo, Thrive Care, Thrive Care logo and TeleHear are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.



Starkey.no

Starkey Norway AS
Postboks 74 Sentrum
4001 Stavanger

